




iREJU HA Filler

Lựa chọn thông minh với chất làm đầy da Hyaluronic Acid

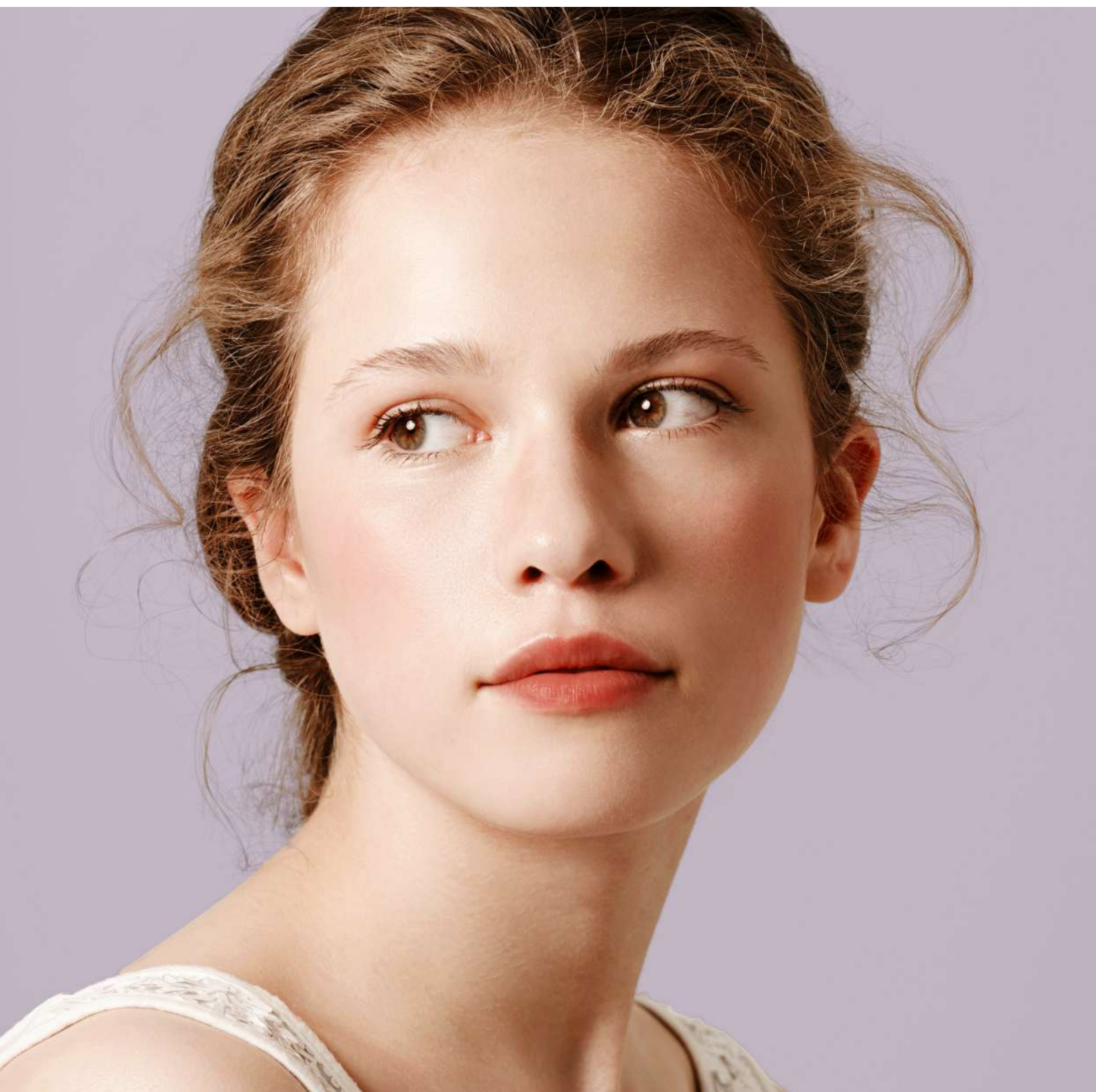


iREJU HA Filler




Tối đa hóa hiệu quả nâng cơ



Cải thiện độ đàn hồi của da

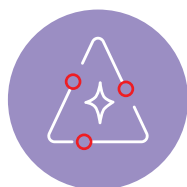

Giải quyết tình trạng da mất nước / khô ráp

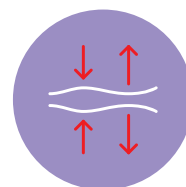

Hiệu quả lâu dài

Sản phẩm Monophasic hoàn hảo





Filler hai pha



Filler iREJU HA đơn pha

- **Chất làm đầy đơn pha lý tưởng** được sản xuất bằng công nghệ nghiên cứu tiên tiến — quy trình sản xuất đảm bảo phân bố hạt cực kỳ mịn và đồng nhất. Điều này tạo ra cấu trúc gel mịn, liên kết tốt, mang lại hiệu quả **tiêm ổn định, dễ dự đoán** và duy trì độ đồng đều trong suốt cả ống tiêm.
- Cấu trúc gel **mềm mại, đàn hồi và đồng nhất** mang lại khả năng định hình tuyệt vời, giúp bác sĩ dễ dàng tạo dáng và điêu khắc vùng điều trị một cách chính xác. Nhờ kết cấu liên kết chặt chẽ, chất làm đầy hòa nhập mượt mà vào mô cơ thể, giúp đạt được **hiệu quả tự nhiên, lâu dài** mà không để lại viên lộ hay các vùng không đều.
- Độ ổn định được nâng cao của gel đơn pha giúp **đẩy gel mượt mà hơn**, giảm lực tiêm và tăng sự kiểm soát cho bác sĩ. Điều này góp phần mang lại sự thoải mái hơn cho khách hàng trong quá trình điều trị và nâng cao độ an toàn chung của thủ thuật.
- Cấu trúc liên kết chéo đồng đều của công thức đảm bảo hiệu quả làm đầy thể tích đáng tin cậy, đồng thời vẫn duy trì độ mềm mại và linh hoạt. Điều này giúp sản phẩm trở nên phù hợp cho các chỉnh sửa tinh tế, tạo nét khuôn mặt và hoàn thiện các đường nét ở những vùng cần vẻ đẹp tự nhiên nhất.

iREJU

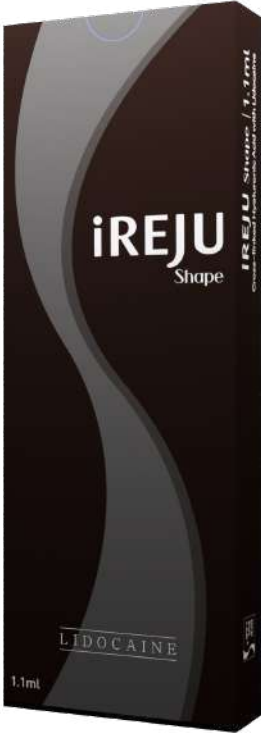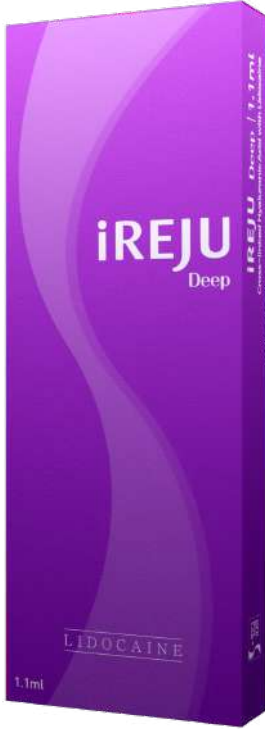Tên sản phẩm	iREJU Shape	iREJU Deep	iREJU Eye
			
Độ sâu tiêm	Lớp dưới da	Lớp trung bì trung bình đến sâu, Lớp dưới da	Lớp trung bì trung bình đến sâu
Kích thước kim	25G	27G	30G
Độ nhót đàn hồi	370-430	270-330	120-180
Thời gian hiệu quả	Từ 12 tháng trở lên	Từ 9 tháng trở lên	Từ 6 tháng trở lên
Nồng độ H	24 mg/mL		
Quy cách đóng gói	1.1mL x 1 ống tiêm/hộp		
Hạn sử dụng	24 tháng		
Bảo quản	Bảo quản ở 2-25°C. Tránh ánh nắng trực tiếp và đóng băng.		
Lidocaine	0.3%		

Quy trình điều trị

Bước 1 – Đánh giá

Đánh giá giải phẫu khuôn mặt và đánh dấu các điểm tiêm dự kiến.

Bước 2 – Chuẩn bị

Làm sạch và sát trùng vùng tiêm; thoa thuốc ủ tê nếu cần thiết.

Bước 3 – Tiêm

Tiêm chất làm đầy theo kế hoạch đã đánh dấu bằng kỹ thuật phù hợp.

Bước 4 – Hoàn tất

Làm sạch vùng điều trị và cung cấp hướng dẫn chăm sóc cơ bản sau thủ thuật.






No	Vùng tiêm	Loại Filler	Thể tích tiêm (mL)
1	Trán	Deep	1~2
2	Thái dương	Deep, Eye	1~2
3	Mũi	Deep	1~2
4	Gò má	Shape, Deep	1~2
5	Rãnh cười	Deep	0.5~1
6	Má hóp	Deep, Eye	1~2
7	Nếp nhăn khóe miệng	Deep, Eye	0.5~1
8	Môi	Deep, Eye	1~2
9	Viên hàm	Deep	1~2
10	Cằm	Shape	1~2

Hướng dẫn chăm sóc sau điều trị




- Tránh trang điểm trong vòng 4 giờ.
- Tránh chạm/sờ vào vùng tiêm trong 24 giờ.
- Tránh nhiệt độ cao (ví dụ: xông hơi) hoặc vận động mạnh trong 24 giờ.
- Tránh nằm úp mặt trong thời gian dài trong vòng một tuần.
- Nếu xuất hiện bất kỳ cảm giác khó chịu, viêm nhiễm hoặc đau đớn nào tại vùng điều trị kéo dài hơn 24 giờ, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

Năng lực cạnh tranh - So sánh dữ liệu lực đẩy gel




Eye

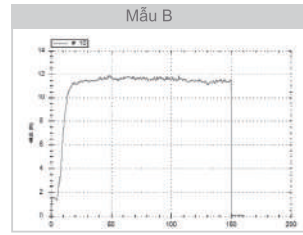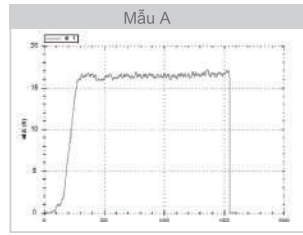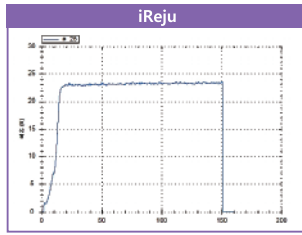

Deep

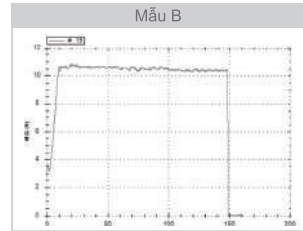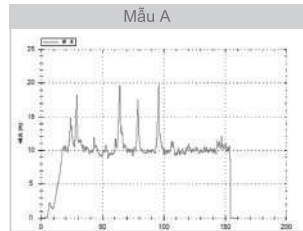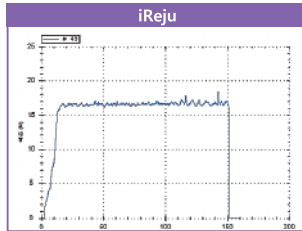


Shape

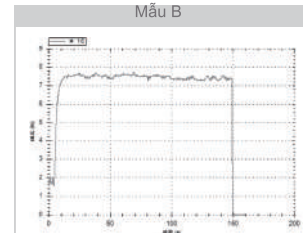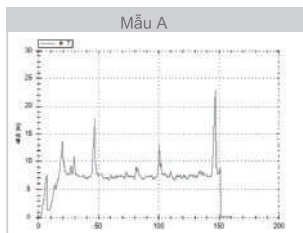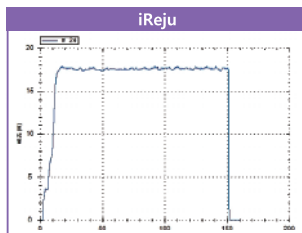

Lực đẩy gel đều và ổn định ở mức cao

Lực đẩy gel tương đối thấp và có sự dao động giá trị lớn

Lực đẩy gel & Áp suất thẩm thấu

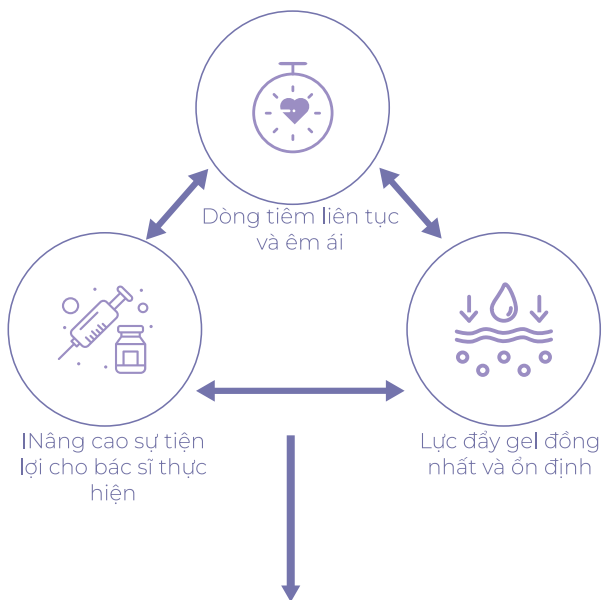

Kích thước hạt đồng nhất nhờ quy trình nghiền mịn.

Áp suất thẩm thấu cao phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở.

Độ nhớt đàn hồi xuất sắc

iREJU

Dạng gel có độ nhớt vừa phải.

Khả năng tạo thể tích tự nhiên
Lực tiêm ổn định và mượt mà

Sản phẩm A

→ Dạng gel độ nhớt thấp

Sản phẩm A

iREJU

Sản phẩm B

Sản phẩm B

→ Dạng gel độ nhớt cao

HIỆU QUẢ


Tối đa hóa hiệu quả nâng cơ nhờ độ nhớt đàn hồi cao.



Độ bền vững và khả năng tạo thể tích vượt trội




Hiệu quả kéo dài lâu hơn so với các sản phẩm khác

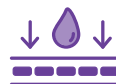


Với độ nhớt đàn hồi tối ưu, sản phẩm được bảo vệ khỏi các lực tác động bên ngoài. Cải thiện khả năng chống biến dạng.

Cải thiện độ an toàn

Trước khi tinh chế

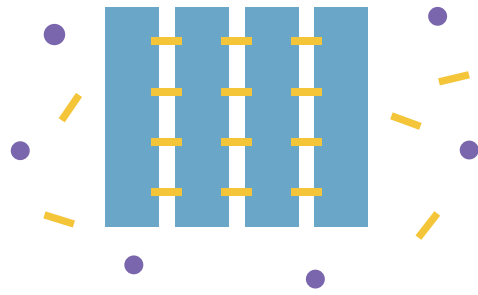

Sau khi tinh chế

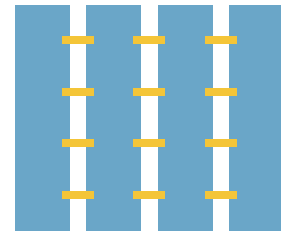

Hyauronic acid BDDE Tạp chất dư



- Sản phẩm được tinh chế giúp **giảm bớt tác dụng** phụ nhờ loại bỏ các chất chưa phản ứng.
- Thực hiện quy trình rửa tối ưu để đạt độ an toàn cao hơn cho sản phẩm:
 - Quy trình rửa kéo dài giúp làm sạch hoàn hảo.
 - Quy trình làm sạch triệt để và toàn diện trong 8 ngày (Ở các công ty khác, chỉ khoảng 1-2 lần/ngày).
 - Quy trình rửa chuyên biệt giúp duy trì tính chất sản phẩm đồng nhất (Áp suất thẩm thấu, độ pH).

➔ Nâng cao độ an toàn của sản phẩm

- Tạp chất BDDE dư thừa nằm dưới ngưỡng tiêu chuẩn = Giảm nguy cơ dị ứng và quá mẫn cảm.

Tối đa hóa độ an toàn của sản phẩm

↓ BDDE ENDOTOXIN PROTEIN PH ↓

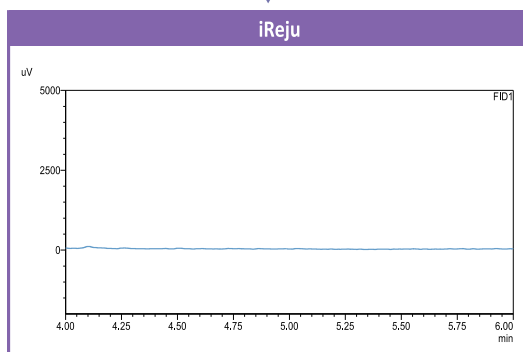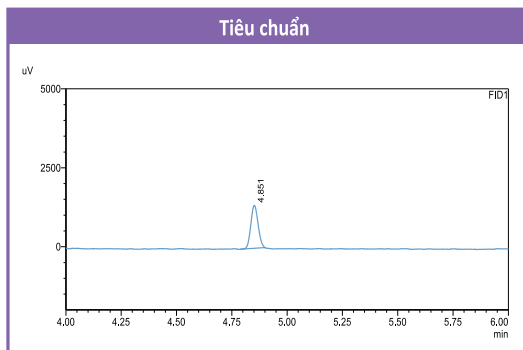


Tối thiểu hóa tỷ lệ BDDE tồn dư và tạp chất thông qua **quy trình rửa kéo dài trong 8 ngày** (so với các công ty khác chỉ khoảng 1-2 lần mỗi ngày).

Hàm lượng Lidocaine tối ưu

Phân tích so sánh hàm lượng Lidocaine


Đơn vị : mg

iReju
Mẫu A
Mẫu B

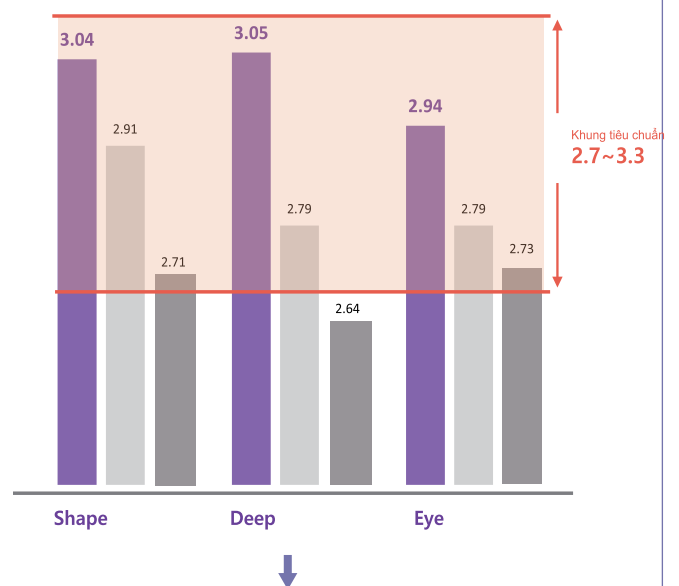

↓
Giảm thiểu đau đớn trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật nhờ sử dụng hàm lượng Lidocaine cao

Hàm lượng HA cao & Quy trình nghiền đặc biệt

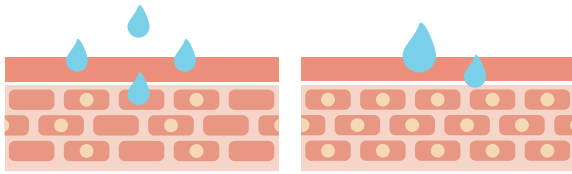


Hyaluronic acid dạng tuyến tính

-Hyaluronic acid liên kết chéo

- Dạng lỏng như nước
- Tình trạng sưng sớm tăng
- Không có quy trình nghiền mịn
- Độ duy trì giảm

- Tiêm êm ái / nhẹ nhàng
- Độ duy trì tăng
- Có quy trình nghiền mịn
- Tốc độ phân hủy giảm+


Hiệu quả tự nhiên từ quy trình nghiền mịn

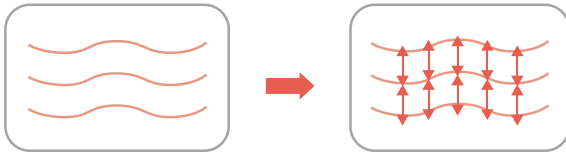

Trước khi liên kết chéo

Sau khi liên kết chéo

Biểu đồ phân tích so sánh hàm lượng HA

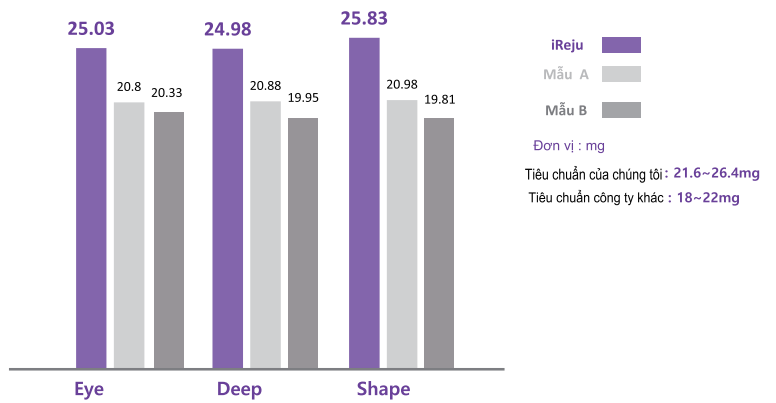

Với hàm lượng hyaluronic acid cao, sản phẩm giúp giảm sự tiếp xúc với các enzym phân hủy và gốc tự do trong cơ thể người, từ đó làm chậm tốc độ phân hủy -> **Hiệu quả kéo dài lâu hơn.**

Trước & Sau

Before	After	Description
		- Nữ / 35 tuổi - Đường viền hàm - iREJU Shape
		- Nam / 28 tuổi - Thể tích cằm - iREJU Shape 1.5cc
		- Nam / 30 tuổi - Thể tích má - iREJU DEEP 1cc



#522 Dongkwang BizTower, 272 Sunhwagung-ro,
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
+82-2-6225-7988

Website: www.sbodyline.com

Email: dfkbio@dfkbio.com