



SARDENYA™ Nucleo
2.5 mL
with LIDOCAINE

Polynucleotide

SARDENYA™ Nucleo
with LIDOCAINE
Polynucleotide

SARDENYA™ Nucleo
2.5 mL
with LIDOCAINE

Polynucleotide

SARDENYA™ Nucleo Plus
with LIDOCAINE

Polynucleotide

SARDENYA™ Nucleo Plus
with LIDOCAINE
Polynucleotide

SARDENYA™ Nucleo with LIDOCAINE

Революция в девайсах эстетической медицины

PN(полинуклеотиды)

Полинуклеотиды — это биосовместимые вещества, полученные из ДНК, которые способствуют регенерации тканей и стимулируют выработку коллагена и эластина. Они помогают улучшить текстуру кожи, её упругость и общий внешний вид.

Что делает их уникальными?

Продукты, содержащие PN, способствуют восстановлению повреждённых тканей, обеспечивая более естественную регенерацию.¹ Недавние исследования продемонстрировали эффективность и безопасность инъекций длинноцепочечных полинуклеотидов в дерматологии и эстетической медицине для омоложения кожи как лица, так и других участков тела.² Оказывают поддержку процессам обновления и ремоделирования внеклеточного матрикса (ECM).³

1. JH Kim et al. Comparative Evaluation of the effectiveness of novel hyaluronic acid-poly nucleotide complex dermal filler. SCIENTIFIC REPORTS. 10:5127 (2020)
2. Maurizio Cavallini et al. Consensus report on the use of PN-HPT™ (polynucleotides highly purified technology) in aesthetic medicine. J Cosmet Dermatol. 20:922–928 (2021)
3. Sree Samanvitha Kuppa et al. Polynucleotides Suppress Inflammation and Stimulate Matrix Synthesis in an In Vitro Cell-Based Osteoarthritis Model. Int. J. Mol. Sci. 24(15) 12282 (2023)




Только сырьё премиального качества

Наши полинуклеотиды (PN) производятся с использованием исключительно высококачественного сырья — молок лосося, поставляемых только от производителей, сертифицированных по системе НАССР и одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).


Клинически доказанная эффективность

*Максимальная эффективность
с высокой концентрацией PN*


Лабораторные (in vitro) исследования показали чёткую зависимость между концентрацией PN и полученными результатами: при увеличении концентрации наблюдается значительное повышение жизнеспособности клеток и более выраженный эффект заживления ран. Аналогично, рост концентрации PN приводит к более заметному усилению процессов миграции клеток.

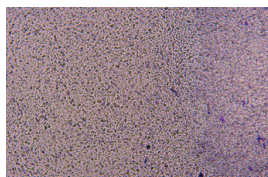


Контрольная группа

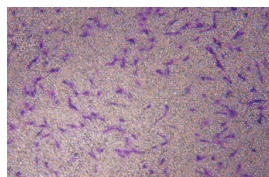


Положительный контроль (FBS)

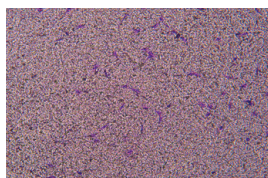


PN 1.3 мг/мл

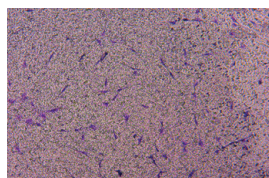




PN 2.5 мг/мл

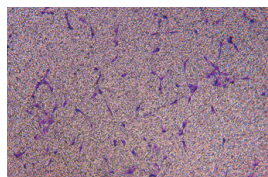

PN 13 мг/мл

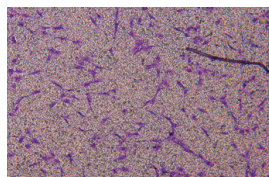

PN 25 мг/мл

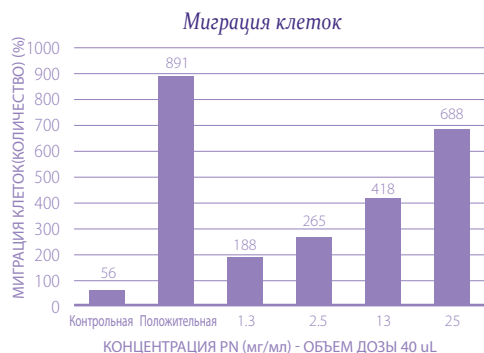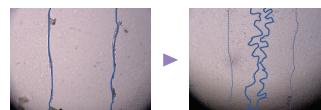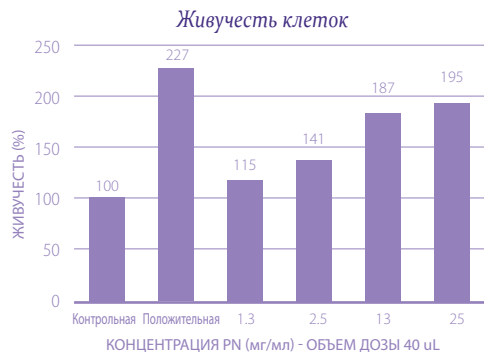

Высокая концентрация и объем

Высокая концентрация

С увеличением концентрации усиливаются свойства PN, что приводит к получению продукта более высокого качества с повышенным содержанием активного компонента.

Большой объем

Каждый шприц Sardanya Nucleo содержит 2,5 мл препарата, что позволяет выполнить полноценную процедуру для всего лица, используя всего один шприц.



Продукт	SARDENYA Nucleo	Продукт А	Продукт В
Содержание PN	25 мг/мл	20 мг/мл	20 мг/мл
Содержание лидокаина	Лидокаин (3 мг/мл)	Нет	Нет
Объем	2.5 мл	2 мл	1 мл

Продукт	SARDENYA Nucleo Plus	Продукт А	Продукт В
Содержание PN	20 мг/мл	10 мг/мл	2 мг/мл
Содержание НА	10 мг/мл	10 мг/мл	Считая 20 мг/мл
Содержание лидокаина	Лидокаин (3 мг/мл)	3 мг/мл	3 мг/мл
Объем	2.5 мл	1 мл	1 мл

Основные эффекты линейки Nucleo

Защита от
УФ повреждений

Уменьшение
пор

SARDENYA™ Nucleo
2.5 mL

with **LIDOCAINE**

Polynucleotide

SARDENYA™
NUCLEO

Осветление и
восстановление

Увлажнение и
питание

Ускорение
производства
коллагена


Разглаживание и
укрепление

SARDENYA Nucleo

способ инъекции:

Способы инъекции:

- SARDENYA Nucleo предназначается для подкожных инъекций
- Вводите препарат по сетчатой схеме, располагая инъекции на расстоянии примерно 0,3–0,5 см друг от друга.
- Важно учитывать индивидуальные особенности — толщину и состояние кожи пациента — при подборе протокола лечения SARDENYA Nucleo, включая дозировку, глубину введения и другие параметры.

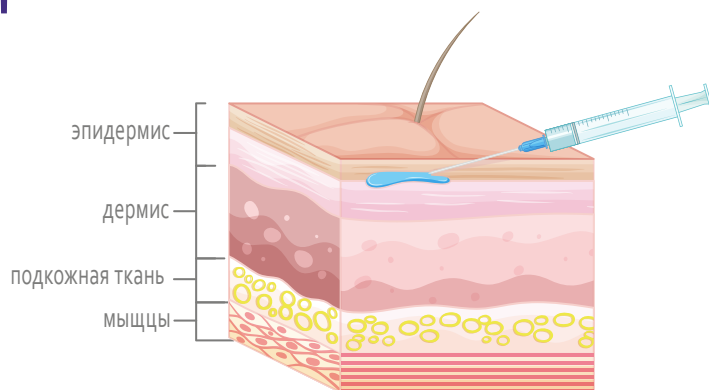

Пример инъекции:

- При введении 2,5 мл препарата:
 - Сконцентрируйте по 1 мл на каждую щёчную область (минимум 50 инъекций по 0,02 мл каждая). Оставшиеся 0,5 мл равномерно распределите по другим зонам или на участки, требующие более выраженной коррекции..
- *Обратите внимание, что данная схема распределения инъекций является примерной и может быть скорректирована в зависимости от индивидуального состояния кожи и потребностей пациента.*



После инъекции:

После инъекций характерный эффект папул («бугорков») является нормальным и может сохраняться примерно от 1 до 3 дней.

Расписание процедур:

- Рекомендуется пройти курс из 2–3 процедур с интервалом 2–4 недели для достижения оптимального результата.
- *Обратите внимание, что интервалы между процедурами могут варьироваться в зависимости от индивидуального состояния кожи и потребностей пациента.*
- Результаты обычно становятся заметны через 2–4 недели после процедуры. Данные рекомендации предназначены для общего понимания техник инъекций и ключевых аспектов применения SARDENYA Nucleo, обеспечивая оптимальные результаты с учётом индивидуальных особенностей и чувствительности каждого пациента.

SARDENYA Nucleo

Информация о продукте



Назначение

Используется для временного улучшения морщин на лице у взрослых за счёт физического восстановления при введении подкожного полинуклеотида, содержащего лидокаин. Лидокаин обеспечивает обезболивающий эффект во время процедуры.

Упаковка

2,5 мл × 1 шприц / коробка

Хранение

1-30°C

Игла

33G 4мм × 2шт

РН / Лидокаин

25 мг/мл / 3 мг/мл



Назначение

Используется для временного улучшения морщин на лице у взрослых за счёт физического восстановления при введении подкожного полинуклеотида, содержащего лидокаин. Лидокаин обеспечивает обезболивающий эффект во время процедуры.

Упаковка

2,5 мл × 1 шприц / коробка

Хранение

1-30°C

Игла

30G 4мм × 2шт

РН /ГК/Лидокаин

20 мг/мл / 10 мг/мл / 3 мг/мл

SARDENYATM

Nucleo



DFKBIO LAB INC.

#522, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (12106)

T +82 2 6225 7984 E dfkbio@dfkbio.com H www.sbodyline.com