

PREENCHIMENTOS DÉRMICOS A ESCOLHA INTELIGENTE DO ÁCIDO HIALURÔNICO



iREJU

#522 Dongkwang BizTower, 272 Soonhwagung-ro,
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

+82-2-6225-7988

www.sbodyline.com

dfkbiolab@sbodyline.com

Competitividade - Conteúdo ideal de lidocaína

Análise comparativa do conteúdo de lidocaína

Unidade: mg



iReju

Amostra A

Amostra B



Minimiza a dor durante o procedimento
usando um alto teor de lidocaína

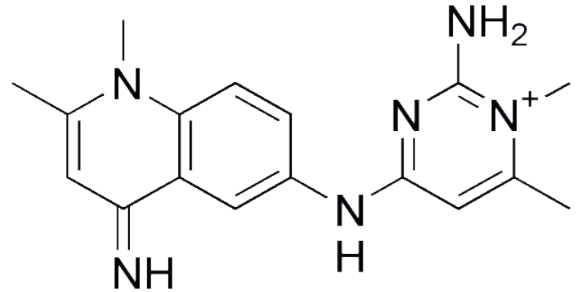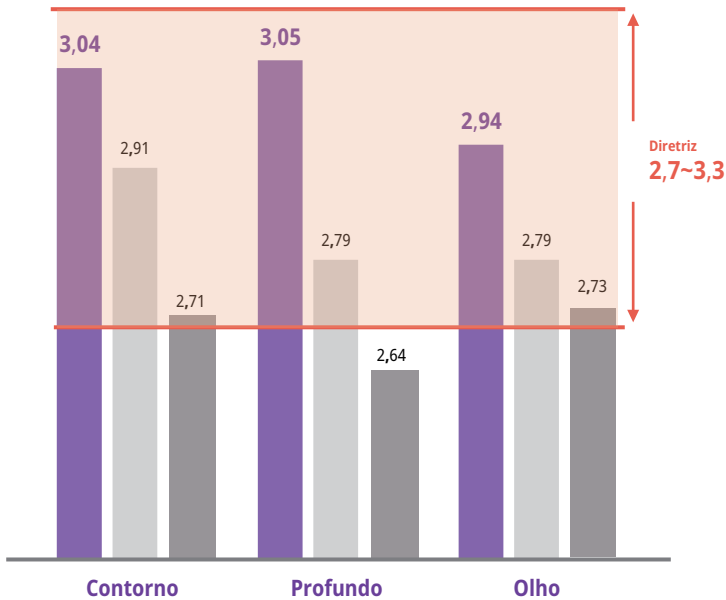

Competitividade - Antes e depois

Antes	Depois	Descrição
		- Idade 31/F - Contorno do nariz - iReju Deep 1cc
		- Idade 28/F - Volume do mento - iReju Shape 1,5cc
		- Idade 30/F - Sulcos nasolabiais - iReju Deep 1cc

iREJU Preenchimento de AH



1,1mL x 1 ser

Acido hialurônico de ligação cruzada

Viscoelasticidade alta


Maximiza o efeito do levantamento



Melhora a elasticidade da pele



Resolve os problemas de desidratação

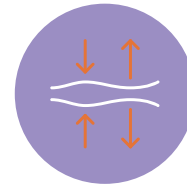

Duração longa

Produto monofásico perfeito



Enchimento bifásico



iREJU

- Produto monofásico ideal, fabricado com o uso de uma máquina de moagem especial e injeção consistente (o produto tem uniformidade)
- Tipo de gel macio e uniforme, mais fácil de moldar para obter **resultado natural**

Instalação de fabricação

Dispositivo médico relacionado à estética. Empresa de fabricação de produtos farmacêuticos



Possui as mais recentes tecnologias de fabricação, enchimento e embalagem, juntamente com os melhores especialistas, para fabricar **produtos de alta qualidade.**

Protocolo

Procedimento

Passo 1 - Avaliação e mapeamento facial

Passo 2 - Limpeza e anestesia

Passo 3 - Injeção

Passo 4 - Limpeza e recuperação



	Área de injeção	Tipo	Volume de injeção (ml)
1	Testa	Profundo	1~2
2	Têmpora	Profundo Olho	1~2
3	Nariz	Profundo	1~2
4	Maças do rosto	Contorno Profundo	1~2
5	Sulcos nasolabiais	Profundo	0,5~1
6	Depressões nas bochechas	Profundo Olho	1~2
7	Linhas de marionete	Profundo Olho	0,5~1
8	Lábios	Profundo Olho	1~2
9	Linhas da mandíbula	Profundo	1~2
10	Queixo	Contorno	1~2

iREJU 1,1ml




Nome do produto	iREJU Shape	iREJU Deep	iREJU Eye
			
Profundidade da injeção	Camada subcutânea	Derme média a profunda. Subcutânea	Derme média a profunda
Tamanho da agulha	25G x 1 ser	27G x 1 ser	30G x 1 ser
Viscoelasticidade (pa)	370-430	270-330	120-180
Duração	12 meses-	9 meses-	6 meses-
Concentração de AH	24 mg / ml		
Embalagem	1,1ml / ser, 1 ser / caixa		
Vida útil	24 meses		
Armazenamento	Armazenar entre 2 - 25 °C. Proteger da luz solar direta e do congelamento		
Lidocaína	0,30%		

Instruções pós-tratamento




- Evite usar maquiagem por 4 horas.
- Evite tocar a área injetada por 24 horas.
- Evite calor excessivo ou exercícios extenuantes por 24 horas.
- Evite deitar-se sobre o rosto, por longos períodos, durante 1 semana.
- Se o desconforto na área de tratamento persistir por mais de 24 horas, consulte um médico.

Competitividade - Comparação de dados brutos de força de extrusão




Olho

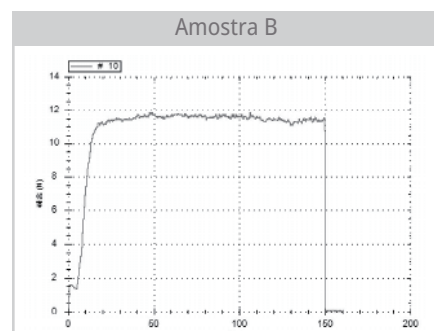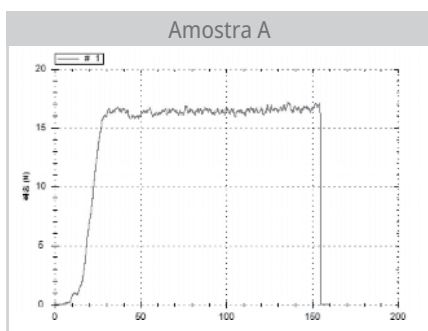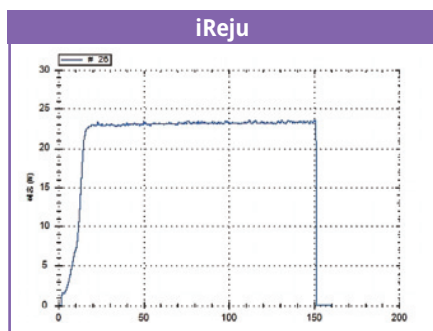

Profundo

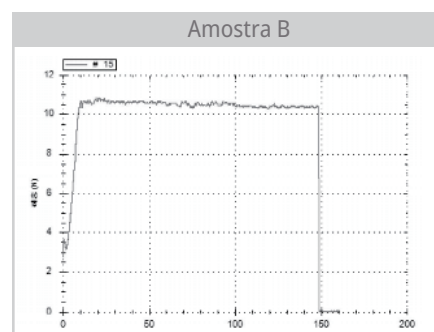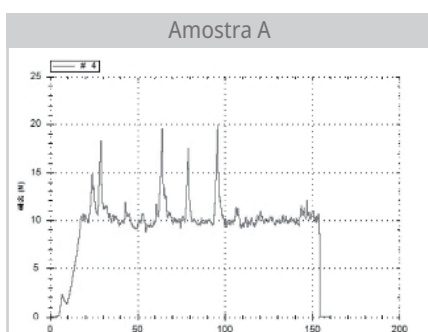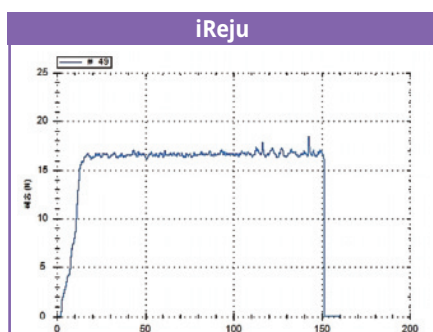

Contorno

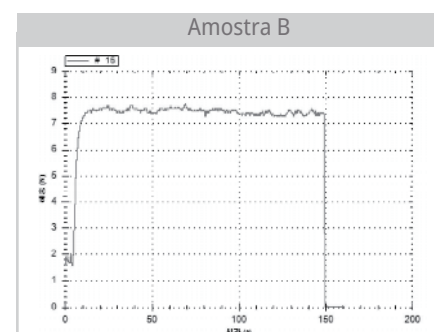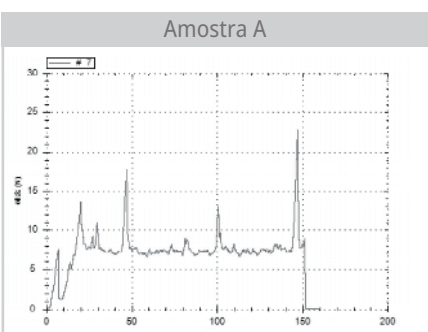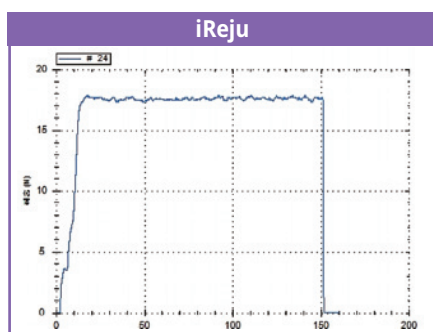

Força de extrusão alta e uniforme

Força de extrusão relativamente baixa e grandes flutuações nos valores

Competitividade - Força de extrusão e pressão osmótica



Tamanho de partícula homogêneo através do processo de moagem fina

Pressão osmótica alta adequada para linha de base

Competitividade - Excelente viscoelasticidade

iREJU

→ Forma de gel levemente viscoso

Capaz de realizar o efeito de volume natural. Força de injeção estável e suave

Produto A

→ Forma de gel de viscosidade baixa

Produto A

iREJU

Produto B


Produto B

→ Forma de gel de viscosidade alta



EFEITO


Maximiza o efeito de elevação com viscoelasticidade alta

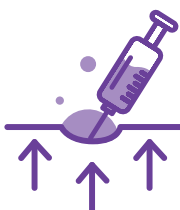

Excelente sustentabilidade e volume.




Duração longa em comparação com outros produtos

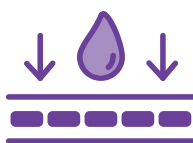


Com viscoelasticidade ótima, é protegido contra forças externas. Maior resistência à deformação.

Competitividade - Segurança aprimorada

Antes da purificação

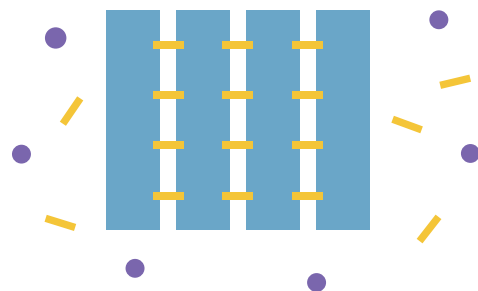

Após a purificação

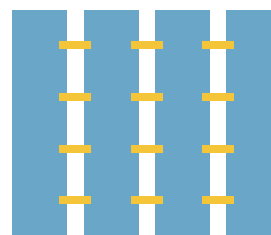

|| Ácido hialurônico ● BDDE — Resíduos

O produto purificado produz menos efeitos colaterais devido à eliminação de materiais que não reagiram

O processo de lavagem ideal foi aperfeiçoado para obter maior segurança do produto

- O processo de lavagem longo permite uma limpeza perfeita
- Processo de limpeza completo de 8 dias (para outras empresas, cerca de 1-2 vezes/dia)
- O processo de lavagem especializado permite propriedades consistentes do produto (pressão osmótica, PH)

Melhora a segurança do produto

O resíduo de BDDE está abaixo do valor padrão = baixa chance de alergia, hipersensibilidade


Competitividade-Maximiza a segurança do produto




PROTEÍNA DE ENDOTOXINA BDDE PH



Padrão

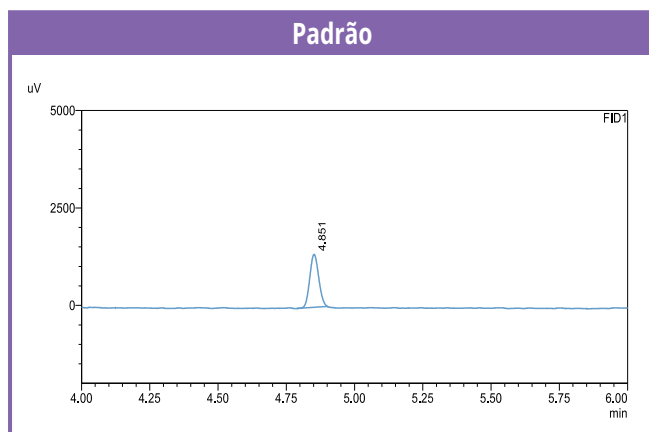


iReju

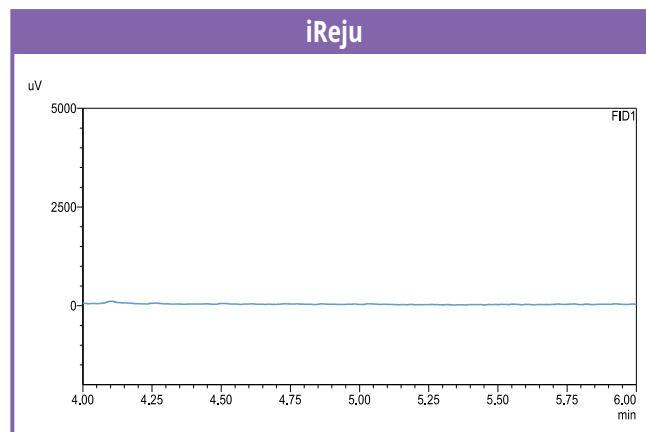


Minimiza a taxa residual de BDDE e resíduos por meio de **lavagem prolongada por 8 dias** (cerca de 1-2 vezes por dia para outras empresas)


Competitividade - Alto conteúdo de AH e processo de retificação especial

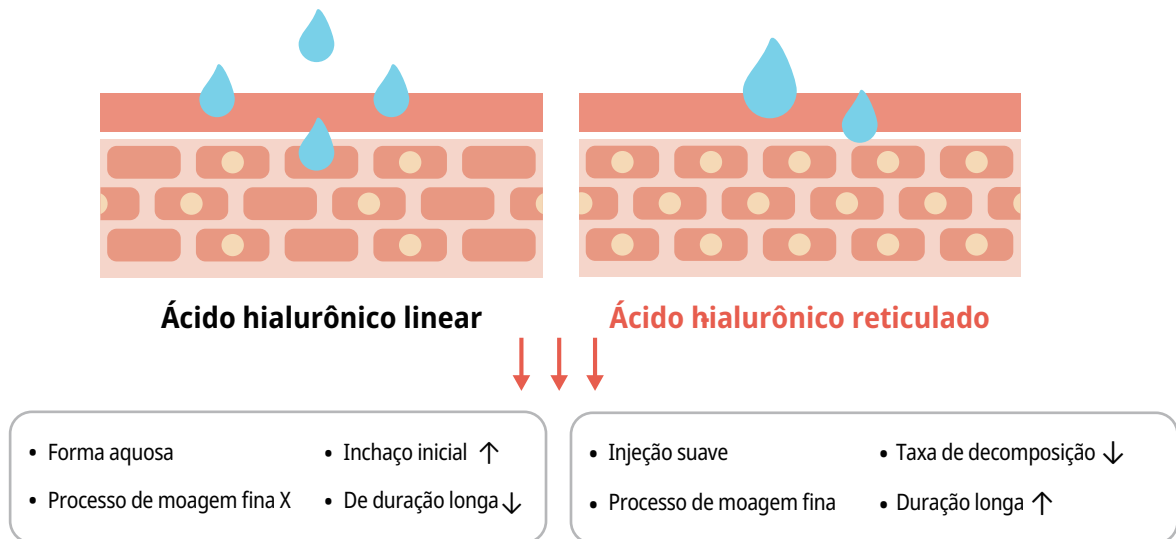

→ **O efeito natural** do processo de moagem fina.

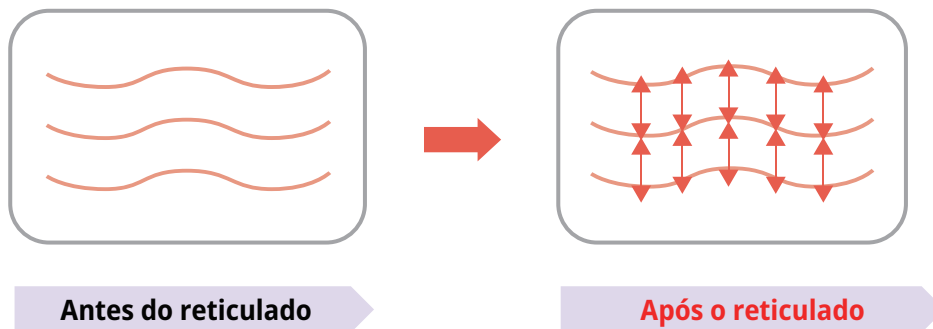

Análise comparativa do conteúdo do AH

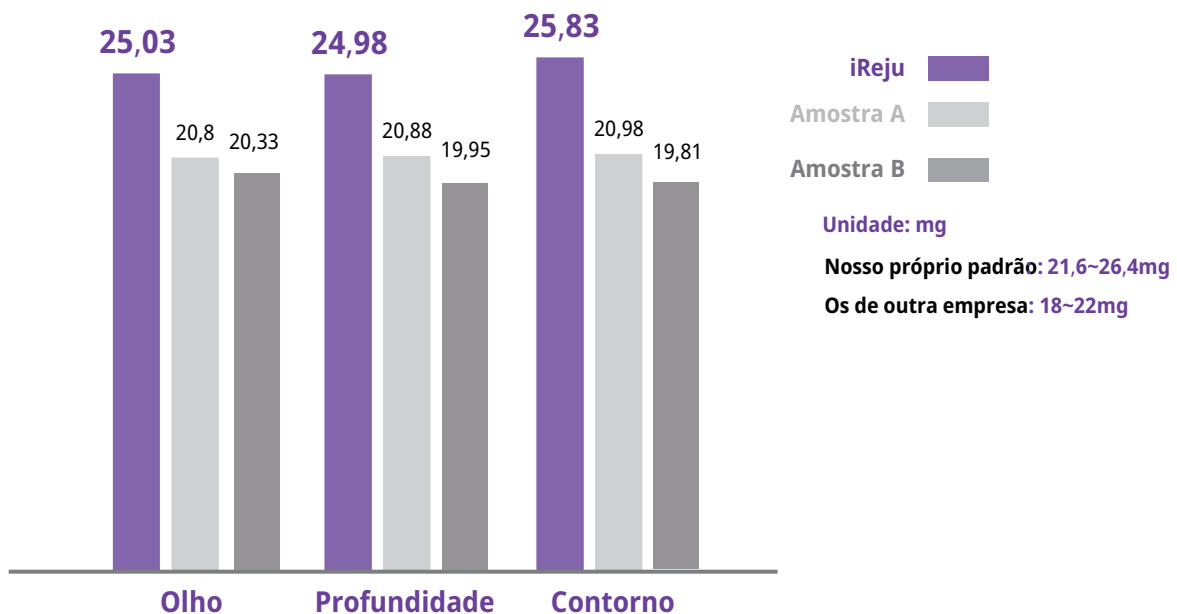

Com um alto conteúdo de ácido hialurônico, reduz a exposição a enzimas de degradação e radicais livres no corpo humano para diminuir a taxa de decomposição -> **Duração longa**